



Therabody

THERAGUN Prime

Urządzenie do **inteligentnej** terapii perkusywnej

Technologia *Quiet***Force**

Wyprodukowane i dystrybuowane przez:

Therabody, Inc.
1640 S Sepulveda
Suite 300 Los Angeles
CA 90025

Importerzy:

Therabody International Limited
5th Floor, 40 Mespil Road
DO4C2N4 Dublin, Irlandia

Therabody UK Limited Portsoken House
155-157 The Minorities, Londyn
Wielka Brytania EC3N1LJ

Dystrybucja na Polskę:

WERON Bartosz Weron
Ul. K. Hoffmanowej 21/2
35-016 Rzeszów,
Polska

Pierwsze Kroki

Krok 1

Proszę pobrać aplikację Therabody

Przeprowadzimy Państwa przez bezstresową konfigurację i pokażemy, jak najlepiej wykorzystać Theragun Prime.

Krok 2

Włącz i korzystaj

Proszę mocno nacisnąć i przytrzymać środkowy przycisk na panelu przycisków, a następnie przesunąć urządzenie Theragun Prime po obszarach które tego wymagają. Proszę użyć przycisków w górę (**▲**) i w dół (**▼**) na panelu przycisków, aby dostosować prędkość. W razie potrzeby proszę zastosować lekki lub umiarkowany nacisk.


Krok 3

Poczuj różnicę™ każdego dnia.


Weź głęboki oddech i poddaj się procedurom terapeutycznym z przewodnikiem w aplikacji Therabody lub w trybie freestyle. Wszystko zostało zaprojektowane z myślą o tobie.

Theragun Prime

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
znajdują się w zakładce ostrzeżenia

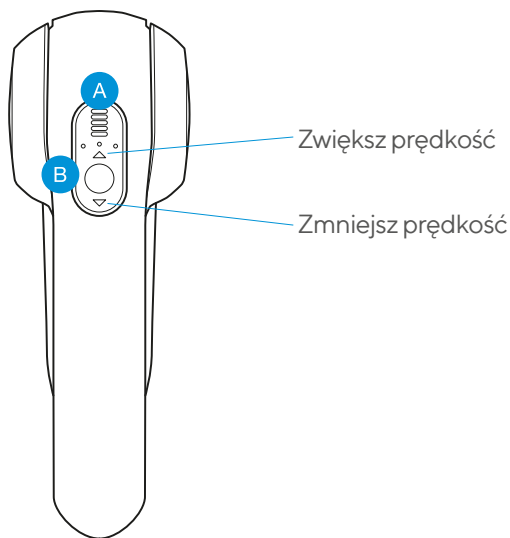

- A** Wskaźniki LED
- B** Panel przycisków
- C** Ergonomiczny uchwyt Theragun Triangle
- D** Port USB-C

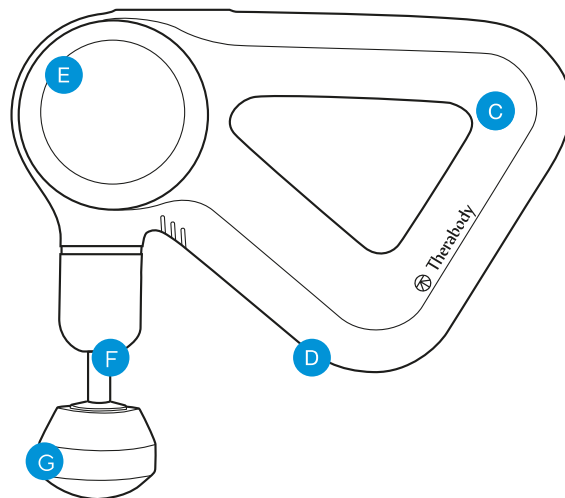


- E** Opatentowany bezszczotkowy silnik klasy komercyjnej z technologią QuietForce™
- F** Amplituda 16 mm do leczenia mięśni głębokich
- G** Wymienne nasadki

Korzystanie z urządzenia Theragun Prime


1. Aby włączyć urządzenie, należy mocno nacisnąć i przytrzymać środkowy przycisk na panelu przycisków.
2. Proszę naciskać przyciski w górę (**▲**) i w dół (**▼**) na panelu przycisków, aby zwiększyć lub zmniejszyć prędkość.
3. Aby wyłączyć urządzenie, należy mocno nacisnąć i przytrzymać środkowy przycisk na panelu przycisków, aż urządzenie się wyłączy.

Uwaga: Zalecamy nie więcej niż dwie minuty ciągłego użytkowania w jednym miejscu.

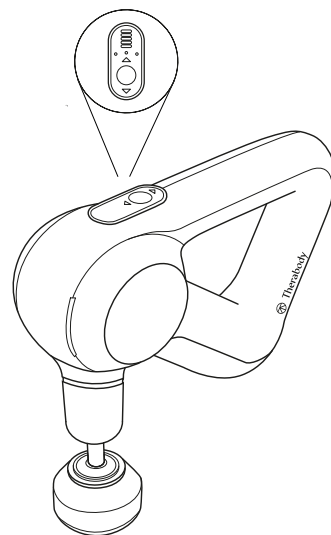

Podłączanie akcesoriów



Dopasować nasadkę do końcówki ramienia i nacisnąć, aby połączyć. Aby odłączyć, proszę chwycić nasadkę, umieszczając jeden palec po obu stronach plastikowego złącza. Proszę zdjąć nasadkę, gdy urządzenie jest wyłączone.

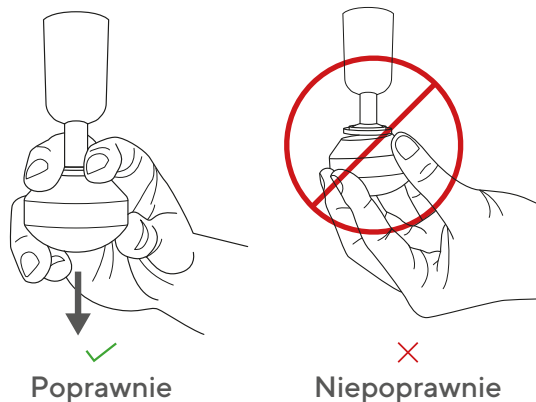

Ładowanie

Urządzenie jest wyposażone w kabel USB-C do USB-C + kabel USB-A, dzięki czemu można korzystać z szerszej gamy adapterów.

3 okrągłe diody LED na panelu sterowania urządzenia wskazują poziom naładowania baterii.

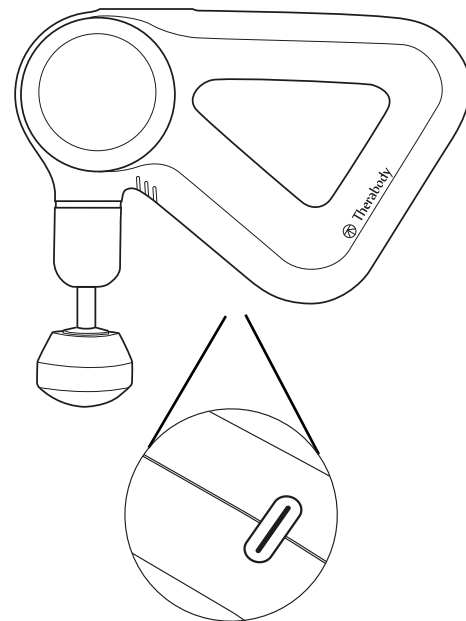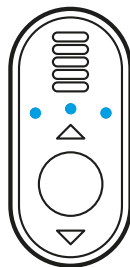

Instrukcje czyszczenia:


Aby urządzenie Theragun było jak najbardziej higieniczne, należy je dezynfekować po każdym użyciu:

1. Przetrzeć urządzenie chusteczką dezynfekującą, aby usunąć wszelkie pozostałości.
2. Gdy urządzenie jest już wolne od pozostałości, proszę użyć nowej chusteczki do dezynfekcji powierzchni, przecierając wszystkie boki ruchem w dół.

Inteligentne funkcje

Theragun Prime to inteligentne urządzenie wyposażone w Bluetooth, zaprojektowane do płynnego parowania z aplikacją Therabody. Po pobraniu aplikacji zostaną Państwo poprowadzeni krok po kroku przez konfigurację w celu sparowania urządzenia.

Po sparowaniu aplikacja może zdalnie regulować prędkość, aktywować protokoły leczenia z przewodnikiem i wydawać zalecenia w czasie rzeczywistym w oparciu o Państwa użytkowanie.

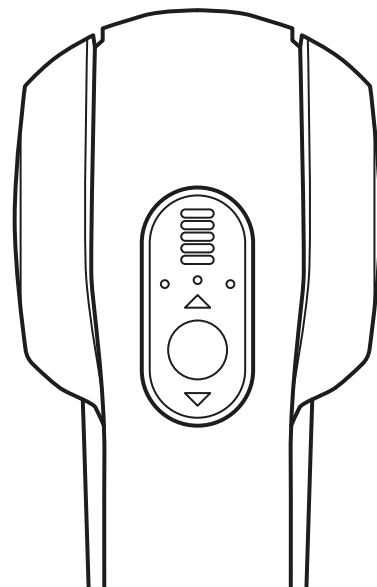

Zeskanuj kod QR, aby
rozpocząć.




Akcesoria

Theragun Prime jest dostarczany z czterema różnymi nasadkami zaprojektowanymi dla każdego mięśnia i potrzeby.

Standard Ball

Do ogólnego użytku

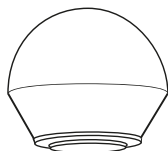


Thumb

Do terapii dolnej części pleców i punktów spustowych




Dampener

Do stosowania na delikatnych obszarach lub w pobliżu kości

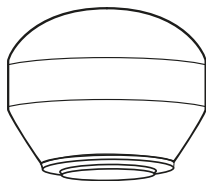

Micro-point

Zapewnia zwiększoną stymulację podczas całego zabiegu

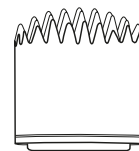

THERAGUN

by Therabody

Stworzony w Los Angeles, Kalifornia.

Zaprojektowany **dla każdego.**



@Therabody

OFICJALNY POLSKI DYSTRYBUTOR

WERON Bartosz Weron

ul. Hoffamnowej 21/2, 35-016 Rzeszów

+48 17 855 46 48

info@weron.pl

OFICJALNA WYPOŻYCZALNIA

STREFA REGENERACJI S.C.

ul. T. Boya-Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów

tel: +48 606 106 366

www.strefaregeneracji.pl