



Therabody

THERAGUN Elite[®]

Urządzenie do inteligentnej terapii perkusywnej

Technologia *Quiet***Force**[™]

Wyprodukowane i dystrybuowane przez:

Therabody, Inc.
1640 S Sepulveda
Suite 300 Los Angeles
CA 90025

Importerzy:

Therabody International Limited
5th Floor, 40 Mespil Road
DO4C2N4 Dublin, Irlandia

Therabody UK Limited
Portsoken House 155-157
The Minorities, Londyn
Wielka Brytania EC3N1LJ

Dystrybucja na Polskę:

WERON Bartosz Weron
Ul. K. Hoffmanowej 21/2
35-016 Rzeszów,
Polska

Pierwsze kroki

Krok 1

Pobierz aplikację Therabody

Przeprowadzimy Cię przez bezstresową konfigurację i pokażemy, jak najlepiej wykorzystać Theragun Elite.

Krok 2

Włącz i korzystaj

Mocno naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk na panelu przycisków, a następnie przesuwaj urządzenie Theragun Elite po obszarach, które tego wymagają. Użyj przycisków plus (+) i minus (-) na panelu przycisków, aby dostosować prędkość. W razie potrzeby zastosuj lekki lub umiarkowany nacisk.


Krok 3

Poczuj różnicę™ każdego dnia.


Weź głęboki oddech i poddaj się zabiegom z przewodnikiem lub w trybie freestyle. Wszystko zostało zaprojektowane z myślą o Tobie.

Theragun Elite

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Znajdują się w zakładce ostrzeżenia

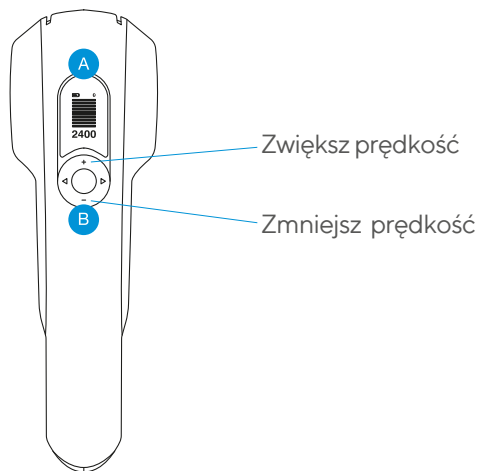

- A Ekran OLED
- B Panel przycisków
- C Ergonomiczny uchwyt Theragun Triangle
- D Port USB-C

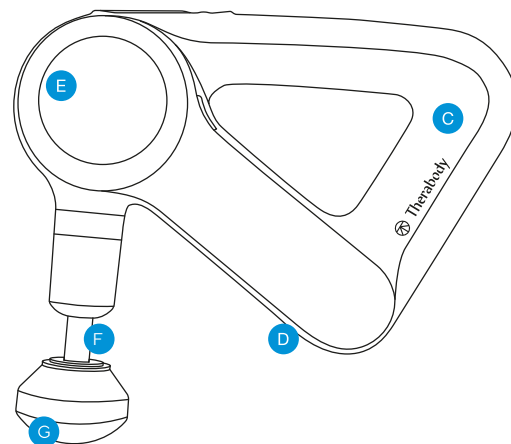

- E Opatentowany bezszczotkowy silnik klasy komercyjnej z technologią QuietForce™
- F Amplituda 16 mm do terapii mięśni głębokich
- G Wymienne nasadki



Korzystanie z Theragun Elite

1. Aby włączyć urządzenie, należy mocno nacisnąć i przytrzymać środkowy przycisk na panelu przycisków.
2. Naciśnij przyciski plus (+) i minus (-) na panelu przycisków, aby zwiększyć lub zmniejszyć prędkość.
3. Naciskaj strzałki w lewo (<) i w prawo (>) na panelu przycisków, aby przełączać się między wstępnie wgranymi ustawieniami leczenia.
4. Aby wyłączyć urządzenie, należy mocno nacisnąć i przytrzymać środkowy przycisk na panelu przycisków, aż urządzenie się wyłączy.


Uwaga: Zalecamy nie więcej niż dwie minuty ciągłego użytkowania w jednym miejscu.

Podłączanie nasadek

Dopasuj nasadkę do końcówki ramienia i naciśnij, aby ją podłączyć. Aby odłączyć, chwyć nasadkę, umieszczając jeden palec po każdej stronie plastikowego złącza. Zdejmij nasadkę, gdy urządzenie jest wyłączone.

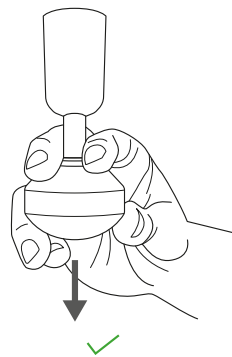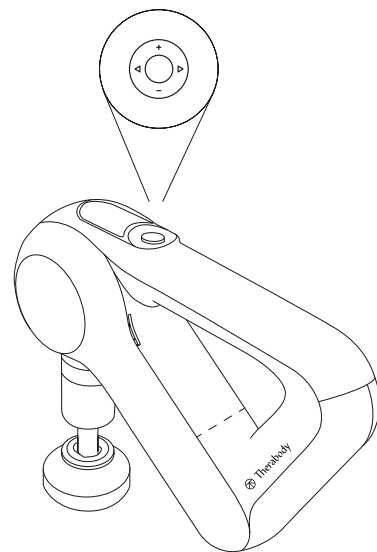

Prawidłowo

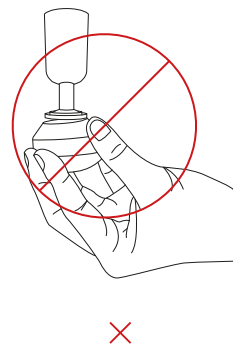

Nieprawidłowo

Ładowanie urządzenia Theragun Elite


Urządzenie jest wyposażone w kabel USB-C do USB-A, dzięki czemu można korzystać z wielu różnych adapterów. Poziom naładowania baterii jest wskazywany na ekranie urządzenia.

Theragun Elite obsługuje ładowanie bezprzewodowe.
Więcej informacji na temat ładowania bezprzewodowego można znaleźć na stronie therabody.com.

Instrukcja czyszczenia:

Aby zapewnić najbardziej higieniczne korzystanie z urządzenia Theragun, należy je dezynfekować po każdym użyciu::


1. Przetrzyj urządzenie chusteczką dezynfekującą, aby usunąć wszelkie pozostałości.
2. Gdy urządzenie będzie wolne od pozostałości, użyj nowej chusteczki do dezynfekcji powierzchni, przecierając wszystkie boki ruchem w dół.

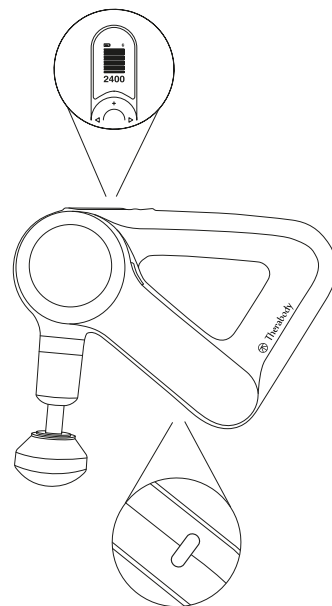

Inteligentne funkcje

Theragun Elite to inteligentne wyposażone w Bluetooth, zaprojektowane do płynnego parowania z aplikacją Therabody. Po pobraniu aplikacji zostaniesz poprowadzony przez konfigurację krok po kroku, aby sparować urządzenie.

Po sparowaniu aplikacja może zdalnie regulować prędkość, aktywować wstępne ustawienia leczenia z przewodnikiem i wydawać zalecenia w czasie rzeczywistym na podstawie użytkowania. Ekran OLED urządzenia Theragun Elite wyświetla aktualną prędkość i siłę, aby pomóc w prowadzeniu leczenia.

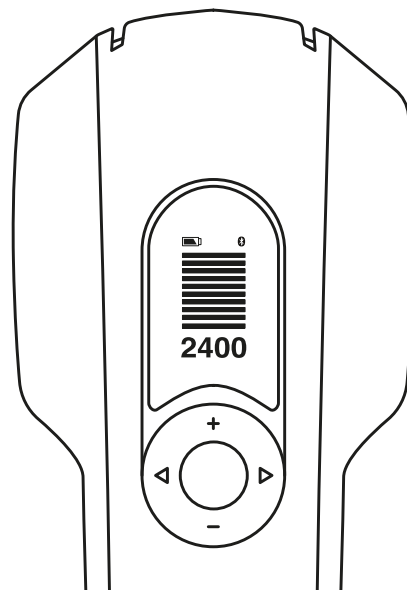

Zeskanuj kod QR,
aby rozpocząć.



Akcesoria

Theragun Elite jest dostarczany z pięcioma różnymi nasadkami zaprojektowanymi dla każdego mięśnia i potrzeby.

Standard Ball

Do ogólnego użytku



Wedge

Do skrobania, łopatek lub pasma IT




Dampener

Do stosowania na delikatnych obszarach lub w pobliżu kości



Micro-point

Zapewnia zwiększoną stymulację podczas całego zabiegu

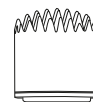

Thumb

Do terapii dolnej części pleców i punktów spustowych



THERAGUN

by Therabody

Stworzony w Los Angeles, Kalifornia.
Zaprojektowany ***dla każdego.***



@Therabody

OFICJALNY POLSKI DYSTRYBUTOR

WERON Bartosz Weron

ul. Hoffamnowej 21/2, 35-016 Rzeszów

+48 17 855 46 48

info@weron.pl