

THERAGUN mini

Pierwsze kroki

Krok 1 | Włącz i przesuвай po ciele

Aby włączyć Theragun mini, mocno naciśnij i przytrzymaj wielofunkcyjny przycisk zasilania/prędkości z boku urządzenia. Przesuwaj Theragun mini po obszarach, które potrzebują masażu. W razie potrzeby zastosuj lekki lub umiarkowany nacisk

Krok 2 | Pobierz aplikację Therabody


We'll guide you through a stress-free setup and show you how to get the most out of your Theragun mini.

Krok 3 | Poczuj różnicę każdego dnia

Take a deep breath and treat yourself with guided treatment presets or freestyle mode. It's all designed for you.

Urządzenie Theragun PRO

- A** Ekonomiczny uchwyt
- B** Wielofunkcyjna dioda LED przycisku zasilania/prędkości
- C** Wskaźnik naładowania baterii
- D** Wskaźnik prędkości LED
- E** Port USB-C
- F** Złącze do mocowania końcówek

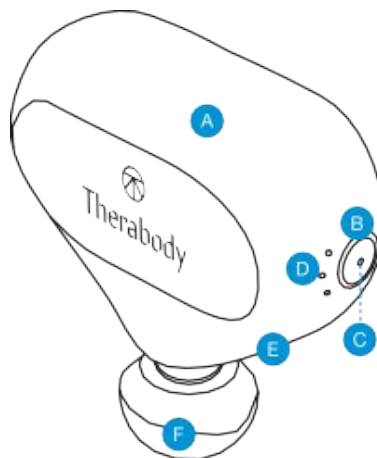


Zobacz wkładkę z ostrzeżeniami, aby zapoznać się z ważnymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa

Użytkowanie Theraguna mini

1. Aby włączyć Theraguna mini, mocno naciśnij i przytrzymaj wielofunkcyjny przycisk zasilania, znajdujący się po prawej stronie.
2. Przesuwaj urządzenie po obszarach wymagających terapii. W razie potrzeby stopniowo wprowadz nacisk (od lekkiego do umiarkowanego)
3. Naciskaj ponownie przycisk zasilania/prędkości, aby przełączyć między 3 prędkościami.
4. To turn off the Theragun mini, firmly press and hold the power/speed button until the device shuts off.

Zakładanie końcówek

1. Ustaw końcówką oraz zakończenie ramienia w jednej linii i naciśnij, aby połączyć. Aby zdjąć, chwyć końcówkę, umieszczając po jednym palcu z każdej strony złącza.
2. Zdejmij końcówkę.

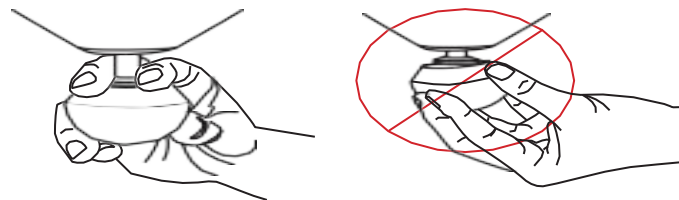

Ładowanie Theraguna mini

1. Theragun mini obsługuje USB-C. W celu ładowania, po wyłączeniu urządzenia, podłącz jeden koniec kabla dołączonego do zestawu do wybranego portu USB, a drugi koniec do urządzenia.
2. Dioda LED na przycisku zasilania/prędkości będzie migać do momentu pełnego naładowania.
3. Ładowanie jest zakończone, gdy dioda LED na przycisku zasilania/prędkości świeci ciągłym zielonym światłem.
4. Gdy urządzenie jest włączone poziom naładowania baterii jest stale wyświetlany na diodzie LED przycisku zasilania/prędkości.
5. Aby wyświetlić poziom naładowania baterii, gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij krótko przycisk zasilania/prędkości, a dioda LED baterii zacznie migać, wskazując poziom naładowania baterii.

Poziom naładowania baterii w Theragun mini jest oznaczony następującymi kolorami:



Miga na pomarańczowo: niski poziom naładowania



Miga na niebiesko: naładowany do połowy



Miga na zielono: wysoki poziom naładowania



Świeci na zielono: w pełni naładowany

Instrukcje dotyczące czyszczenia:

W celu utrzymania prawidłowej higieny dezynfekuj urządzenie po każdym użyciu:

1. Przetrzyj urządzenie chusteczką dezynfekującą, aby usunąć wszelkie pozostałości.
2. Gdy urządzenie będzie wolne od pozostałości, użyj nowej chusteczki. Przesuwaj ją ruchem w dół po wszystkich bokach, aby zdezynfekować ich powierzchnię.

Inteligentne funkcje

Twój Theragun mini to inteligentne urządzenie z łącznością Bluetooth, zaprojektowane do parowania z aplikacją Therabody. Po pobraniu aplikacji zostaniesz poprowadzony krok po kroku przez konfigurację parowania urządzenia.



Zeskanuj kod QR,
aby rozpocząć

Attachments

Theragun mini dostarczany jest z trzema różnymi końcówkami, dopasowanymi do różnych mięśni i potrzeb.

- Wykonana z komfortowej pianki PU o zamkniętych porach
- Higieniczna i łatwa do czyszczenia
- Nie absorbuje potu, sebum, czy balsamów



Standard Ball

Ukierunkowane działanie przy użyciu ogólnym



Dampener

Do wrażliwych obszarów lub w pobliżu kości



Thumb

Przy bólach lędźwi i do terapii punktów spustowych