




Therabody

THERAGUN PRO Plus

Instrukcja obsługi

SPIS TREŚCI

- Informacje o produkcie
- Pobieranie aplikacji Therabody
- Połączenie z aplikacją
- Zawartość zestawu
- Zapoznanie z urządzeniem
- Pierwsze kroki
- Korzystanie z urządzenia
- Korzyści
- Korzystanie z czujnika biometrycznego urządzenia
- Podłączenie końcówek
- Korzystanie z końcówek
- Pielęgnacja i czyszczenie urządzenia
- Ładowanie

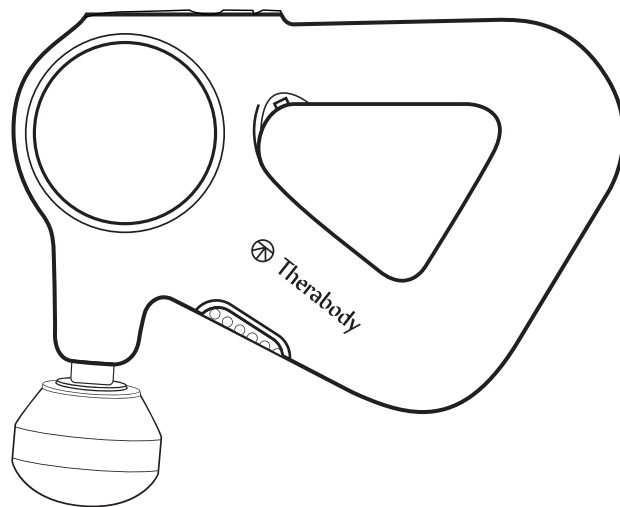

1. Informacje o produkcie

THERAGUN PRO Plus

Twój partner dla dobrego samopoczucia umysłu i ciała.

Podnieś swoją wydajność dzięki urządzeniu Theragun PRO Plus – innowacyjnemu urządzeniu do multiterapii, które łączy nasz najsilniejszy masaż mięśni głębokich z terapią światłem LED, terapią wibracjami, terapią ciepłem i terapią zimnem w celu szybszej i skuteczniejszej regeneracji.

Korzystaj z każdej terapii osobno lub łącz terapie, aby skuteczniej zadbać o swoje ciało. Urządzenie Theragun PRO cieszy się zaufaniem profesjonalistów. Naukowo potwierdzono, że zastosowane w nim terapie łagodzą ból, wspierają leczenie stawów, poprawiają mobilność, optymalizują regenerację, poprawiają wydajność fizyczną i psychiczną. Wyposażone we wbudowany czujnik biometryczny, sterowanie oddechem i procedury z przewodnikiem, które krok po kroku przeprowadzają przez sesję.

2. Pobierz aplikację Therabody, aby w pełni wykorzystać możliwości swojego urządzenia.

Podłącz urządzenie Theragun PRO Plus do aplikacji Therabody, aby uzyskać dostęp do treści szkoleniowych i edukacyjnych, które pomogą Ci zapoznać się z urządzeniem. Dzięki procedurom i zaleceniom prowadzonym krok po kroku aplikacja Therabody pokazuje, jak najlepiej wykorzystać urządzenie Theragun PRO Plus.



**Zeskanuj kod QR,
aby rozpocząć.**

3. Podłącz urządzenie Theragun PRO Plus do aplikacji Therabody

Zacznij tutaj, jeśli jesteś nowym użytkownikiem aplikacji Therabody.


1. Pobierz aplikację Therabody ze sklepu App Store lub Play Store.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby utworzyć nowe konto w aplikacji Therabody i zweryfikować swój adres e-mail.
3. Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aby włączyć urządzenie Theragun PRO Plus. Urządzenie Theragun PRO Plus musi być włączone, aby można je było zlokalizować i sparować z aplikacją Therabody.
4. Zaloguj się i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby podłączyć urządzenie Theragun PRO Plus do aplikacji. Upewnij się, że ustawienia Bluetooth w telefonie są włączone.
5. Po wyświetleniu monitu wybierz "Theragun PRO Plus" jako urządzenie Therabody.
6. Po nawiązaniu połączenia możesz dowiedzieć się, jak korzystać z urządzenia, przeglądać katalog procedur krok po kroku, których skuteczność została potwierdzona naukowo i pobierać spersonalizowane procedury do Theragun PRO Plus.

Zacznij tutaj, jeśli wcześniej korzystałeś z aplikacji Therabody.

1. Otwórz aplikację Therabody i przejdź do ekranu głównego.
2. Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aby włączyć urządzenie Theragun PRO Plus. Urządzenie Theragun PRO Plus musi być włączone, aby można je było zlokalizować i sparować z aplikacją Therabody.
3. Naciśnij na nagłówek ekranu głównego, aby dodać nowe urządzenie. Upewnij się, że ustawienia Bluetooth w telefonie są włączone.
4. Po wyświetleniu monitu wybierz "Theragun PRO Plus" jako urządzenie Therabody.
5. Po nawiązaniu połączenia możesz dowiedzieć się, jak korzystać z urządzenia, przeglądać katalog procedur krok po kroku, których skuteczność została potwierdzona naukowo i pobierać spersonalizowane procedury do Theragun PRO Plus.



4. Zawartość zestawu

- A** Urządzenie Theragun PRO Plus
- B** Podgrzewana końcówka
- C** Końcówka do terapii wibracjami
- D** Pięć końcówek perkusyjnych (Dampener, Thumb, Standard Ball, Micro-point, Wedge)
- E** Kabel do ładowania USB-C
- F** Końcówka do terapii zimnem (sprzedawana oddzielnie)

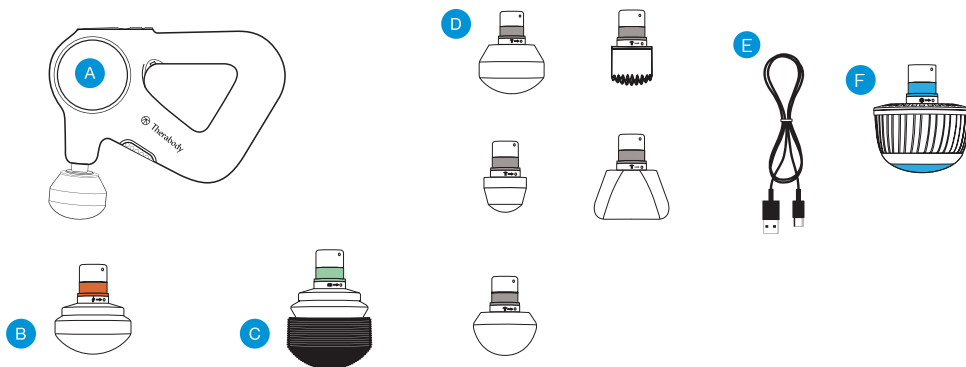

Zapoznanie z urządzeniem Theragun

- A** Wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości TFT LCD
- B** Panel przycisków
- C** Terapia światłem podczerwonym LED
- D** Czujnik biometryczny
- E** Opatentowany trójkątny uchwyt
- F** Port do ładowania USB-C

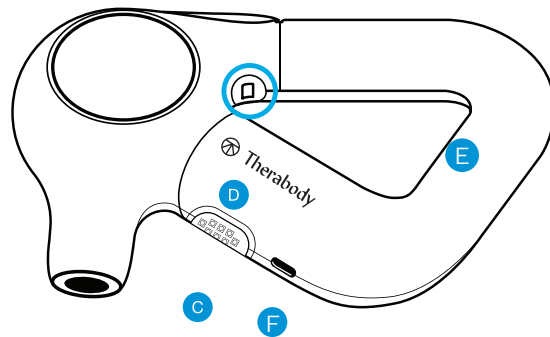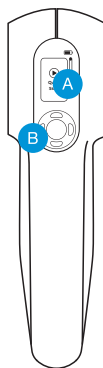

6. Pierwsze kroki

Włączanie i wyłączanie urządzenia Theragun.

Aby włączyć urządzenie Theragun PRO Plus, należy mocno nacisnąć środkowy przycisk na urządzeniu. Mocno naciśnij ten sam przycisk, aby wyłączyć urządzenie.

Krok 1 Podnieś i przytrzymaj urządzenie.

Wsunięty ergonomicznie zaprojektowany trójkątny uchwyt Theragun. Nasz opatentowany trójkątny uchwyt Theragun z wieloma możliwościami chwytu uchwytami jest trójsronny, dzięki czemu urządzenie Theragun PRO Plus można trzymać z dowolnej strony na różne sposoby, co ułatwia masowanie trudno dostępnych miejsc, takich jak plecy, bez obciążania dłoni, nadgarstków i przedramion.

Krok 2 Włącz i wypróbuj urządzenie.

Mocno naciśnij środkowy przycisk, aby włączyć urządzenie. Ekran TFT LCD urządzenia zaświeci się, gdy urządzenie będzie włączone. Za pomocą przycisków w górę i w dół można wybrać opcję Quick Start lub przełączać się między różnymi procedurami zabiegowymi. Naciśnij środkowy przycisk, aby wybrać zabieg. Przesuwaj urządzenie Theragun PRO Plus w przód i w tył nad obszarem zabiegowym i eksperymentuj z różnymi stopniami nacisku na ciało – od lekkiego do umiarkowanego. Nie zaczynaj od wywierania nacisku bezpośrednio na obszar, w którym odczuwasz dyskomfort. Zamiast tego należy powoli przesuwac urządzenie po danym obszarze, aby zmniejszyć napięcie.

Krok 3 Korzystanie z aplikacji Therabody

Połącz urządzenie Theragun PRO Plus z aplikacją Therabody, aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z urządzenia i uzyskać dostęp do procedur opisanych krok po kroku. Dzięki aplikacji Therabody możesz korzystać z rutyn ćwiczeń, które obejmują wszystkie rodzaje terapii i otrzymywać zalecenia oparte na osobistych celach, aktywnościach i obawach związanych z dobrym samopoczuciem. Korzystając z aplikacji Therabody, można również pobrać procedury z przewodnikiem bezpośrednio na urządzenie Theragun PRO Plus, aby uzyskać szybki dostęp w podróży.

7. Korzystanie z urządzenia Theragun PRO Plus

Wybierz końcówkę do terapii perkusyjnej i podłącz ją do urządzenia.

Wsunięty ergonomicznie zaprojektowany uchwyt Theragun Triangle. Mocno naciśnij środkowy przycisk z przodu urządzenia, aby włączyć urządzenie Theragun PRO Plus. Ekran TFT LCD urządzenia zaświeci się, gdy urządzenie będzie włączone.

Wybierz opcję "Quick Start" (Szybki start), aby rozpocząć korzystanie z urządzenia bez procedury z przewodnikiem lub przełączaj się między zaprogramowanymi procedurami terapii z przewodnikiem i naciśnij środkowy przycisk, aby wybrać procedurę.


Po wybraniu żądanego zabiegu należy przełączać się między pięcioma opcjami prędkości, aby odpowiednio zwiększyć lub zmniejszyć prędkość zabiegu.

Przesuwaj urządzenie po obszarach wymagających trapii, stopniowo stosując lekki lub umiarkowany nacisk w razie potrzeby. Miernik siły pojawi się na chwilę na wyświetlaczu TFT LCD, gdy urządzenie zacznie wywierać nacisk na ciało.

Postępuj zgodnie z instrukcjami w programie, gdy urządzenie prowadzi Cię do poruszania się między grupami mięśni.

Aby wstrzymać, pominąć, zakończyć lub wznowić zabieg, należy przełączyć na odpowiedni wskaźnik i krótko nacisnąć przycisk.

Terapia światłem podczerwonym LED. Urządzenie Theragun PRO Plus jest wyposażone w 13 diod LED, które zapewniają terapię światłem podczerwonym LED. Aby dodać terapię światłem podczerwonym LED do swojej rutyny, przełącz na wskaźnik światła podczerwonego LED. Krótkie naciśnięcie włącza terapię światłem podczerwonym LED, a krótkie naciśnięcie wyłącza ją. Terapia światłem podczerwonym LED jest najskuteczniejsza, gdy jest stosowana bezpośrednio na skórę. Terapia światłem podczerwonym LED będzie stosowana jednocześnie z terapią perkusyjną, wibracyjną i ciepłą. Aby zmaksymalizować korzyści z terapii, należy stosować ją przez około 90 sekund na każdym obszarze zabiegowym. Terapia światłem podczerwonym LED nie włącza się podczas zabiegów terapii zimnem.

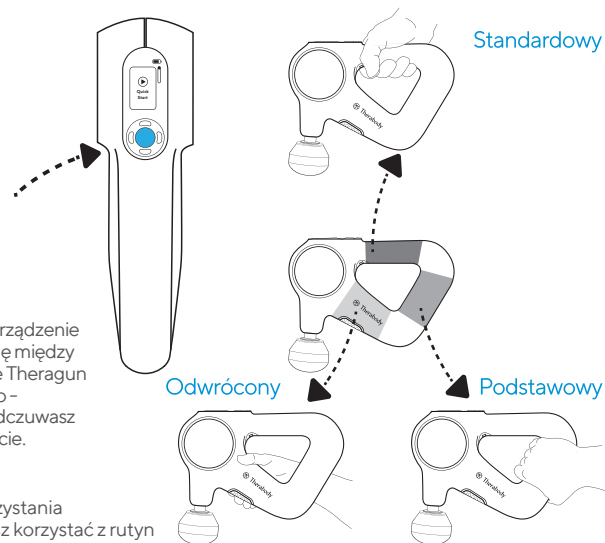

Terapia wibracyjna. Aby dodać terapię wibracyjną do swojej rutyny, podłącz końcówkę wibracyjną do urządzenia. Przejdź do kroku 2, aby używać urządzenia z końcówką wibracyjną.

Terapia ciepłem. Aby dodać terapię ciepłem do swojej rutyny, podłącz końcówkę do terapii ciepłem do urządzenia. Krótco naciśnij prawy przycisk, aby przełączyć na wskaźnik ciepła. Krótco naciśnij przycisk w górę, aby zwiększyć temperaturę ogrzewania i krótco naciśnij przycisk w dół, aby zmniejszyć temperaturę ogrzewania. Dostępne są trzy ustawienia temperatury: niska, średnia i wysoka.

Niska: Użyj niskiego ustawienia temperatury, jeśli dopiero zaczynasz korzystać z terapii ciepłem.

Średnia: Użyj średniego ustawienia temperatury, aby uzyskać odpowiednią wydajność.

Wysoka: Ustawienie wysokiej temperatury należy stosować na lekkich ubraniach lub podczas szybkiego przemieszczania końcówki po obszarze poddawany zabiegowi.

Terapia zimnem. *Kończówka do terapii zimnem sprzedawana oddzielnie. Aby dodać terapię zimnem do swojej rutyny, podłącz końcówkę do terapii zimnem do urządzenia. Krótco naciśnij prawy przycisk, aby przełączyć na wskaźnik zimna. Krótco naciśnij przycisk w górę, aby zwiększyć chłodzenie i odwrotnie. Dostępne są trzy ustawienia - niski, średni i wysoki poziom chłodzenia.

Niski: Użyj ustawienia niskiego na wrażliwych obszarach i jeśli dopiero zaczynasz stosować terapię zimnem.

Średni: Użyj średniego ustawienia do regeneracji całego ciała i ogólnego dyskomfortu.

Wysoki: Ustawienie wysokiego chłodzenia zapewnia ukierunkowaną ulgę w bólu.

Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie.

8. Korzyści z terapii

Tryb terapii	Obszar terapii	Zalecane użycie - kiedy i gdzie używać
Tylko terapia perkusyjna	Mięśnie	Stosuj jako codzienny masaż przez maksymalnie dwie minuty na mięsień, aby zmniejszyć napięcie i poprawić elastyczność.
Terapia perkusyjna + terapia światłem podczerwonym LED	Mięśnie	Używaj przez maksymalnie 60 sekund na mięsień, aby zmaksymalizować rozgrzewkę, rozluźniając sztywne mięśnie i pomagając zapobiegać bólom, co pozwoli ci osiągnąć najlepsze wyniki.
Terapia perkusyjna + terapia ciepłem	Mięśnie	Używaj przez maksymalnie 60 sekund na mięsień, aby przyspieszyć regenerację, zmniejszyć bolesność, poprawić krążenie i stymulować regenerację.
Terapia perkusyjna + terapia ciepłem + terapia światłem podczerwonym LED	Mięśnie	Ten masaż o najwyższej intensywności trwa do 60 sekund na mięsień, aby pobudzić krążenie i zmniejszyć ból.
Tylko terapia wibracyjna	Stawy + mięśnie	Stosuj przez maksymalnie 5 minut na obolałe i wrażliwe mięśnie i stawy, aby zwiększyć krążenie i zmniejszyć ból oraz sztywność.
Terapia wibracyjna + terapia światłem podczerwonym LED	Stawy + mięśnie	Stosuj przez maksymalnie 3 minuty na obolałe i wrażliwe mięśnie i stawy aby stymulować gojenie, pobudzić krążenie i poprawić regenerację.
Terapia zimnem (kończówka sprzedawana oddzielnie)	Stawy + mięśnie	Stosuj przez 2-5 minut na mięśnie i stawy, aby zmniejszyć obrzęk, stan zapalny i ból.

9. Korzystanie z czujnika biometrycznego urządzenia Theragun PRO Plus





Procedury dostępu z czujnikiem biometrycznym w aplikacji Therabody

Aplikacja Therabody umożliwia dostęp do katalogu ćwiczeń oddechowych wykorzystujących czujnik biometryczny do pomiaru i wyświetlania tętna. Procedury łączące się z czujnikiem biometrycznym są oznaczone ikoną tętna.

Aby skorzystać z czujnika biometrycznego urządzenia, należy trzymać urządzenie w pozycji "podwójnego uchwytu", trzymając czubek palca wskazującego na czujniku biometrycznym. Zakryj cały czujnik czubkiem palca.



Nie należy ścisnąć ani mocno naciskać czujnika biometrycznego, ponieważ może to prowadzić do niedokładnych odczytów. Podeprzyj urządzenie wolną ręką lub oprzyj urządzenie o swoje ciało, aby zmniejszyć nacisk na czujnik biometryczny.

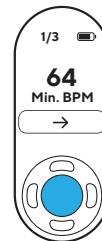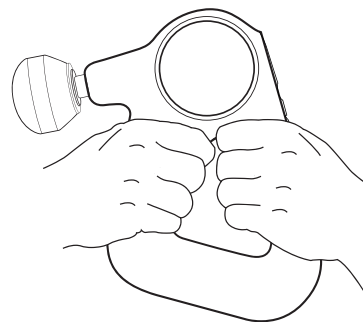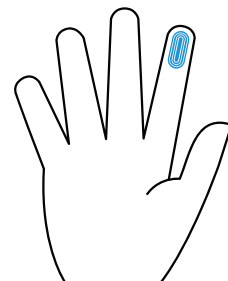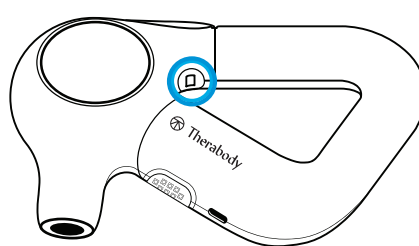

Wstępnie ustawiona procedura oddychania z przewodnikiem

Urządzenie Theragun PRO Plus zapewnia wstępnie ustawioną, popartą naukowo procedurę oddychania z przewodnikiem, która pomaga się zrelaksować. W menu głównym naciśnij przycisk w dół, aby przełączać się między zaprogramowanymi opcjami, a następnie wybierz opcję Oddychanie. Trzymaj urządzenie w pozycji "podwójnego uchwytu", trzymając czubek palca wskazującego na czujniku biometrycznym. Urządzenie będzie wibrować w określonym tempie, prowadząc użytkownika przez uspokajającą procedurę wdechu i wydechu. Podczas tej procedury urządzenie Theragun PRO Plus mierzy tętno użytkownika. Najniższe (minimalne) tętno zostanie wyświetlone po zabiegu jako informacja zwrotna na temat poziomu relaksu podczas sesji. Celem jest obniżenie tętna.

Skanowanie tętna i wyświetlanie na urządzeniu

Określ swoje aktualne tętno za pomocą dotknięcia palcem. Włącz urządzenie i dwukrotnie dotknij czujnika biometrycznego jednym palcem. Znajdź wygodną pozycję, w której czubek palca wskazującego całkowicie zakrywa czujnik biometryczny. Zminimalizuj ruch do momentu wyświetlenia aktualnego tętna na ekranie – około 15-30 sekund.

Zminimalizuj ruch i nie ścisnij ani nie naciskaj mocno czujnika biometrycznego, ponieważ może to prowadzić do niedokładnych odczytów.

Informacje biometryczne użytkownika nie będą dostępne ani w żaden inny sposób wykorzystywane przez Therabody lub jej podmioty stowarzyszone, chyba że użytkownik wyraźnie wyrazi zgodę na udostępnienie nam tych danych za pośrednictwem aplikacji Therabody i będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z Polityką prywatności Therabody.

10. Podłączanie końcówek

Przed podłączeniem lub odłączeniem końcówek należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.

Wyrównaj białą kropkę na urządzeniu z białą kropką na końcówce. Włóż przystawkę do ramienia urządzenia, przekręć i zablokuj.

Aby odblokować i zdjąć mocowanie, przekręć je w odwrotnym kierunku i pociągnij.


* Podłączać wyłącznie końcówki dołączone do urządzenia Theragun PRO Plus lub sprzedawaną oddzielnie końcówkę do terapii zimnem. Końcówki z innych urządzeń Theragun nie są kompatybilne z urządzeniem Theragun PRO Plus.

Ostrzeżenie: Nie należy umieszczać palca między mocowaniem a końcem ramienia, ponieważ może to spowodować uszczyknięcie lub obrażenia.

11. Korzystanie z końcówek


Urządzenie Theragun PRO Plus posiada osiem wysokiej jakości nasadek zaprojektowanych z myślą o bardziej spersonalizowanym leczeniu. Pięć nasadek uderowych, Dampener, Standard Ball, Thumb, Micro-point i Wedge oraz nasadki Vibration, Heat i *Cold są wygodne i higieniczne, nie wchłaniając potu, balsamu ani olejków.

*Nasadka chłodząca sprzedawana oddzielnie

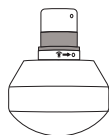


Dampener – do delikatnych lub wrażliwych obszarów i ogólnego zastosowania.

Użyj końcówki Dampener, aby uzyskać mocny, ale bardziej miękki i kojący masaż całego ciała. Nasadka Dampener została specjalnie zaprojektowana do ogólnego użytku i łagodnego masażu delikatnych, wrażliwych lub kościstych obszarów. Za pomocą tego urządzenia należy bezpośrednio dotykać kości (np. kręgosłupa, rzepki). Szeroka podstawa maksymalizuje powierzchnię dla większego, bardziej efektywnego kontaktu z ciałem.

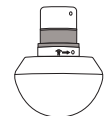

Standard Ball – dla dużych i małych grup mięśni.


Użyj końcówki Standard Ball do masażu całego ciała. Została specjalnie zaprojektowana do ogólnego użytku zarówno na dużych, jak i małych grupach mięśni. Dzięki mniejszemu kształtowi i wyższemu poziomowi uderzenia niż Dampener, jest to mocniejsza opcja do ogólnego użytku i aktywacji mięśni.

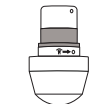


Thumb – na punkty spustowe i dolną część pleców.

Uśmierz ból za pomocą końcówki Thumb o wysokim punkcie nacisku. Specjalnie zaprojektowana, aby naśladować ludzki kciuk. Użyj tej nasadki do terapii punktowej w dolnej części pleców lub w dowolnym miejscu, w którym mógłbyś użyć kciuka w celu złagodzenia bólu.

ZAKŁADANIE

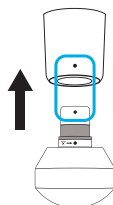


ZDEJMOWANIE

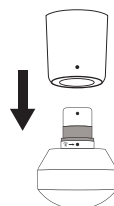

Końcówka vibracyjna – dla stawów i obszarów kostnych.


Łagodzenie bólu stawów i terapia wrażliwych obszarów.

Użyj końcówki do terapii vibracyjnej, aby złagodzić ból stawów i wspomagać leczenie obszarów w okolicy kości. Nasadka vibracyjna zwiększa krążenie krwi, aby wspomagać terapię wrażliwych obszarów.

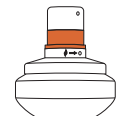


Końcówka do terapii ciepłem – dla mięśni.

Rozluźnia zeszywniałe mięśnie i przyspiesza regenerację. Użyj podgrzewanej końcówki, aby rozluźnić sztywne mięśnie przed treningiem lub po treningu, aby przyspieszyć regenerację mięśni.

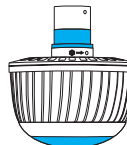

Końcówka do terapii zimnem (sprzedawana oddzielnie) – na stawy i mięśnie.

Zmniejszenie stanu zapalnego, bólu i obrzęku. Użyj końcówki chłodzącej, aby złagodzić obrzęk i zmniejszyć stan zapalny.

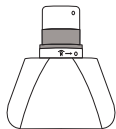

Wedge – na łopatki i pasma biodrowo-piszczelowe.

Rozgrzej mięśnie i popraw elastyczność dzięki końcówce **Wedge**. Unikalnie zaprojektowana do stosowania na łopatkach i pasmach IT, nasadka klinowa służy do ruchów “skrobania” i “omiatania”, odzwierciedlając techniki powszechnie stosowane w masażach sportowych.



Micro-point – dla zwiększonej stymulacji.

Zwiększ krążenie dzięki końcówce **Micro-Point**. Nasadka zapewnia wysoce ukierunkowany zabieg i zwiększa stymulację oraz krążenie w każdym obszarze zabiegowym.

12. Pielęgnacja i czyszczenie urządzenia Theragun PRO Plus

Konserwacja urządzenia

Poniższe instrukcje konserwacji są ważne, aby zapewnić, że urządzenie będzie nadal działać zgodnie z przeznaczeniem. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować, że urządzenie przestanie działać.

Pielęgnacja i czyszczenie

Urządzenie Theragun PRO Plus **NIE** jest wodoodporne ani nie można go prać w pralce. Nie wolno dopuścić do przedostania się cieczy lub wody do urządzenia lub portu ładowania.

Przed czyszczeniem należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.

W celu wyczyszczenia należy przetrzeć powierzchnię urządzenia chusteczką dezynfekującą, aby usunąć wszelkie pozostałości. Upewnij się, że czujnik biometryczny jest czysty, aby zapewnić optymalną precyzję skanowania.

Gdy urządzenie będzie wolne od zanieczyszczeń, użyj czystej ściereczki dezynfekującej, aby dokładnie wyczyścić powierzchnię i końcówki, wycierając okrężnymi ruchami.

13. Ładowanie

Poziom naładowania baterii urządzenia jest stale wyświetlany na ekranie TFT LCD w prawym górnym rogu, gdy urządzenie jest wyłączone.

Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed ładowaniem; urządzenie nie włączy się podczas ładowania.

Urządzenie Theragun PRO Plus obsługuje standard USB-C. Aby naładować urządzenie Theragun PRO Plus, podłącz jeden koniec dołączonego kabla USB-C do urządzenia, a drugi koniec do adaptera (nie jest sprzedawany z urządzeniem).

Gdy urządzenie jest wyłączone i ładuje się, na ekranie TFT LCD wyświetlany jest procentowy poziom naładowania baterii.

Gdy urządzenie zostanie w pełni naładowane, ikona baterii zmieni kolor na zielony i wyświetli poziom naładowania 100%.

Po zakończeniu ładowania odłącz kabel USB-C od urządzenia Theragun PRO Plus.

Czas pracy urządzenia Theragun PRO Plus na baterii wynosi około 120 minut.

****Uwaga:** W przypadku korzystania z innego kabla USB-C należy upewnić się, że pochodzi on z zaufanego źródła i nie został uszkodzony. Nie próbuj korzystać z urządzenia podczas ładowania.

Przeznaczenie

Terapia masażem perkusyjnym

Łagodzi bóle, poprawia wydajność, usprawnia regenerację i poprawia elastyczność.

Terapia światłem podczerwonym LED

Stymuluje krążenie, aby przyspieszyć regenerację. Połącz z innymi terapiami, aby uzyskać bardziej skuteczny zabieg.

Zobacz wkładkę z ważnymi dotyczącymi

Terapia wibracyjna

Łagodzi bóle stawów i wrażliwych obszarów.

Terapia ciepłem

Rozluźnia napięte mięśnie i przyspiesza regenerację.

Czujnik biometryczny

Wbudowany czujnik biometryczny

dla spersonalizowanych informacji.

Praca z oddechem z przewodnikiem

Procedury oddechowe ze wskazówkami zmniejszające stres i poprawiające relaksację.

Terapia zimnem (kończówka sprzedawana oddzielnie)

Zmniejszenie stanu zapalnego, bólu i obrzęku.

THERAGUN

by Therabody

Stworzony w Los Angeles, Kalifornia.
Zaprojektowany dla **każdego**.



@Therabody

OFICJALNY POLSKI DYSTRYBUTOR

WERON BARTOSZ WERON

ul. Hoffmanowej 21/2, 35-016 Rzeszów

tel: +48 17 855 46 48

www.weron.pl

OFICJALNA WYPOŻYCZALNIA

STREFA REGENERACJI S.C.

ul. T. Boya-Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów

tel: +48 606 106 366

www.strefaregeneracji.pl